


Kühlen und kauen mit **OrthoChewz!**

ORTHO  
CHEWZ™

orthocare essentials™

Ersatz für Silikon-Chewies

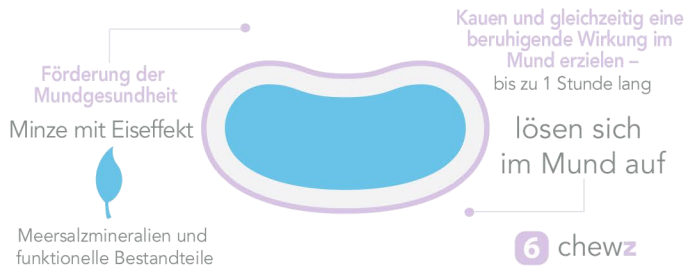

Optimaler Sitz und beruhigende Wirkung bei Alignern ~  
Schmerzlinderung bei Zahnsparren

**Linderung von Beschwerden und Mundtrockenheit**

Ideal für Zahnsparren, Aligner und sonstige  
Zahnkorrektursysteme geeignet!



Kühlen und kauen mit **OrthoChewz!**

ORTHO  
CHEWZ™

orthocare essentials™

- Die innovative Zusammensetzung der **OrthoChewz** wurde von einem Kieferorthopäden entwickelt, um eine auf Wissenschaft und Forschung basierende Lösung zur Linderung von Beschwerden beim Tragen von Alignern und Zahnsparren bereitzustellen. **OrthoChewz** zählen zu den ersten löslichen Kaurollen, die zudem wohltuende Inhaltsstoffe zur Förderung der Mundgesundheit enthalten. Statt Silikonprodukte zu verwenden, die zu Bakterienansammlungen in der Aufbewahrungsbox Ihres Aligners führen können, bieten unsere löslichen Kaurollen den praktischen Vorteil, dass sie jederzeit und überall verwendet werden können.



- Linderung von Beschwerden und Mundtrockenheit
- Kühlen, kauen und beruhigen – bis zu 5 Minuten oder auch länger
- Lösen sich nach über 1 Stunde im Mund auf
- Mit funktionellen und wohltuenden Inhaltsstoffen

Zum Bestellen scannen



So werden **OrthoChewz** verwendet

1. Öffnen Sie die Verpackung der OrthoChewz. Zur Steigerung der kühlenden Wirkung können Sie das Produkt im Kühlschrank aufbewahren.
2. Entnehmen Sie 1 OrthoChewz und stecken Sie es in den Mund.
3. Bewahren Sie die restlichen OrthoChewz in der fest verschlossenen Verpackung auf.
4. Setzen Sie Ihre Aligner-Schienen ein und kauen Sie 5 Minuten bzw. so lange Sie möchten.
5. Die OrthoChewz lösen sich mindestens eine Stunde lang in Ihrem Mund auf.
6. Wenn Sie eine Zahnsparre tragen, können Sie OrthoChewz jederzeit zum Kühlen und Kauen verwenden.

**Inhaltsstoffe:** Gelatine, Kokosnussöl, Xylit, natürlicher Pfefferminzgeschmack, Sucralose, Menthol, Totes Meer Salz, Kaliumsorbat (als Frischeschutz), Eugenol, Brillantblau FCF.

Alle Rechte vorbehalten. Patent angemeldet. Hergestellt in den USA. Hergestellt für: ORTHONU, LLC. Rumson, NJ 07760

