


# mouth-aid™

orthocare essentials™

Aide les tissus mous de la cavité buccale

bouche saine  
naturel

sel marin minéraux et  
éléments fonctionnels

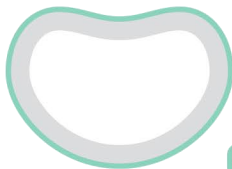

soulage  
instantanément  
les plaies

pendant 1 à 2 heures  
ou plus

6 aides buccales

Protège les tissus mous de l'intérieur des lèvres et des joues

## Apaise les aphtes et les irritations

Idéal pour les appareils orthodontiques,  
les gouttières et d'autres encore !



# mouth-aid™

orthocare essentials™

La formulation innovante de **l'aide buccale** a été créée par un orthodontiste afin d'apporter une solution basée sur la science et la recherche à la gêne occasionnée par le port de gouttières et d'appareils dentaires. **L'aide buccale** est l'un des premiers produits contenant des ingrédients fonctionnels qui apaisent toutes les irritations de la bouche. Que ce soit pour un appareil orthodontique ou une gouttière pendant un traitement orthodontique, vous pouvez utiliser **l'aide buccale** autant de fois que nécessaire.



- Fabriqué avec des ingrédients fonctionnels et bénéfiques
- Fournit la meilleure formulation pendant 1 heure ou plus.
- Apaise et protège la bouche, l'intérieur des lèvres et les joues
- Protège les tissus mous de la cavité buccale

Scanner pour commander



### Voici comment utiliser les aides buccales

1. Ouvrez un paquet d'aides buccales et séchez la zone irritée.
2. Décollez 1 aide buccale en la tenant par les bords.
3. Conservez le reste des aides buccales dans l'emballage et fermez-le.
4. Placez l'aide buccale sur le point localisé qui est inconfortable ou irrité et appuyez sur la zone.
5. Gardez la bandelette pendant une heure ou plus.
6. Ne mangez pas et ne buvez pas pendant ce temps afin d'optimiser le soulagement.
7. Vous pouvez l'enlever à tout moment et manger et boire normalement.

Tous droits réservés Brevet en instance Fabriqué aux États-Unis Fabriqué pour : ORTHONU, LLC. Rumson, NJ 07760

