

mouth-aid™


orthocare essentials™

Βοήθημα για τον μαλακό ιστό στη στοματική κοιλότητα

υγιές στόμα
φυσικό



θαλασσινό αλάτι, μεταλλικά
στοιχεία και λειτουργικά
στοιχεία

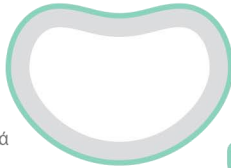

άμεση
ανακούφιση
για πληγές

για έως και 1-2 ώρες ή
περισσότερο

6 mouth-aids

Προστατεύει τον μαλακό ιστό στο εσωτερικό των χειλιών
και των μάγουλων

Ανακουφίζει από έλκη και ερεθισμούς

Κατάλληλο για σιδεράκια, νάρθηκες ευθυγράμμισης και πολλά άλλα!



mouth-aid™

orthocare essentials™

Η πρωτοποριακή σύνθεση του **mouth-aid** δημιουργήθηκε από έναν ορθοδοντικό για να παρέχει μια βασισμένη στην επιστήμη και την έρευνα λύση για τη δυσφορία για όσους φορούν νάρθηκες ευθυγράμμισης και σιδεράκια. Το **mouth-aid** είναι μια από τις πρώτες εφαρμογές ανακούφισης για κάθε ερεθισμό στο στόμα σας με λειτουργικά συστατικά. Είτε πρόκειται για σιδεράκια είτε για νάρθηκες ευθυγράμμισης που χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια ορθοδοντικής θεραπείας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **mouth-aid** όσες φορές χρειάζεται.



- Κατασκευάζεται με λειτουργικά και φυσικά συστατικά
- Παρέχει την καλύτερη σύνθεση για μέχρι 1 ώρα ή και περισσότερο
- Ανακουφίζει και προστατεύει το στόμα, το εσωτερικό των χειλιών και των μάγουλων
- Προστατεύει τον μαλακό ιστό στη στοματική κοιλότητα

Σαρώστε για να παραγγείλετε



Ακολουθούν οδηγίες για τη χρήση του **mouth-aid**



1. Ανοίξτε μια συσκευασία mouth-aid και στεγνώστε την ερεθισμένη περιοχή.
2. Αποφλοιώστε 1 mouth-aid κρατώντας το από τις άκρες.
3. Φυλάξτε τα υπόλοιπα mouth-aid στη συσκευασία και σφραγίστε την.
4. Τοποθετήστε το mouth-aid στο συγκεκριμένο σημείο όπου αισθάνεστε δυσφορία ή που είναι ερεθισμένο και πιέστε στην περιοχή
5. Κρατήστε την ταινία τοποθετημένη για 1-2 ώρες ή περισσότερο.
6. Μην τρώτε ή πίνετε σε αυτό το διάστημα, για να μεγιστοποιήσετε τα αποτελέσματα της ανακούφισης.
7. Αφαιρέστε το αποφλοιώνοντας ανά πάσα στιγμή για να φάτε και να πιείτε κανονικά.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Κατασκευάζεται στις Η.Π.Α. για την: ORTHONU, LLC. Rumson, NJ 07760

