


Sollievo con **mouth-aid!**

mouth-aid™

orthocare essentials™

Soluzione per i tessuti molli della cavità orale

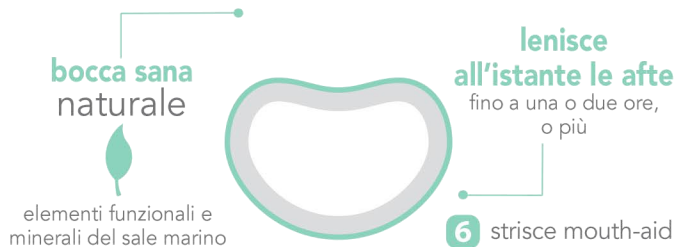

Protegge i tessuti molli all'interno delle labbra e delle guance

Lenisce ulcere e irritazioni

Ideale per apparecchi fissi, allineatori e altro ancora!



Sollievo con **mouth-aid!**

mouth-aid™

orthocare essentials™

La formula innovativa di **mouth-aid** è stata creata da un ortodontista per una soluzione basata sulla scienza e sulla ricerca contro i disagi degli apparecchi ortodontici e degli allineatori. **mouth-aid** è una delle prime applicazioni con ingredienti che mitigano attivamente qualsiasi irritazione della bocca. Puoi usare **mouth-aid** tutte le volte che vuoi durante il trattamento ortodontico.



- Realizzate con ingredienti efficaci e naturali
- Formula attiva fino a un'ora o più
- Aiuta a proteggere e dare sollievo alla bocca, all'interno delle labbra e alle guance
- Protegge i tessuti molli della cavità orale

Scansiona per ordinare



Come usare mouth-aid

1. Apri la confezione di mouth-aid e asciuga l'area irritata.
2. Stacca una striscia di mouth-aid tenendola per il bordo.
3. Conserva le rimanenti strisce di mouth-aid nella confezione ben chiusa.
4. Sistema la striscia di mouth-aid sul punto su cui senti fastidio o irritazione e premicela sopra.
5. Tieni la striscia per una o due ore, o più.
6. Per ottimizzarne l'effetto, non mangiare o bere durante questo arco di tempo.
7. Staccala in qualsiasi momento per mangiare e bere normalmente.

Tutti i diritti riservati. Brevetti in corso di registrazione. Prodotto negli U.S.A. per: ORTHONU, LLC, Rumson, NJ 07760

Lotto 030424 Scadenza 2026-03



8 50035 48903 1